

**LINK**<sup>®</sup> 

*LinkSymphoKnee*  
Built on TRUST 




*“Il ginocchio LinkSymphoKnee PS è stato ideato per ottenere un rollback femorale sicuro. I componenti consentono inoltre l'uso di un inserto PS+ per affrontare facilmente l'instabilità del legamento in fase intraoperatoria, senza un effetto dannoso sul range di movimento. I nostri primi risultati sono stati molto favorevoli, con una eccellente funzionalità e un rapido sollievo dal dolore nella fase post operatoria.”*

**– Alejandro G. Della Valle MD Hospital for Special Surgery, New York City, NY<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dr. Della Valle ha eseguito il primo impianto negli Stati Uniti dell'LSK presso HSS nell'agosto 2021.

## LinkSymphoKnee

Built on TRUST

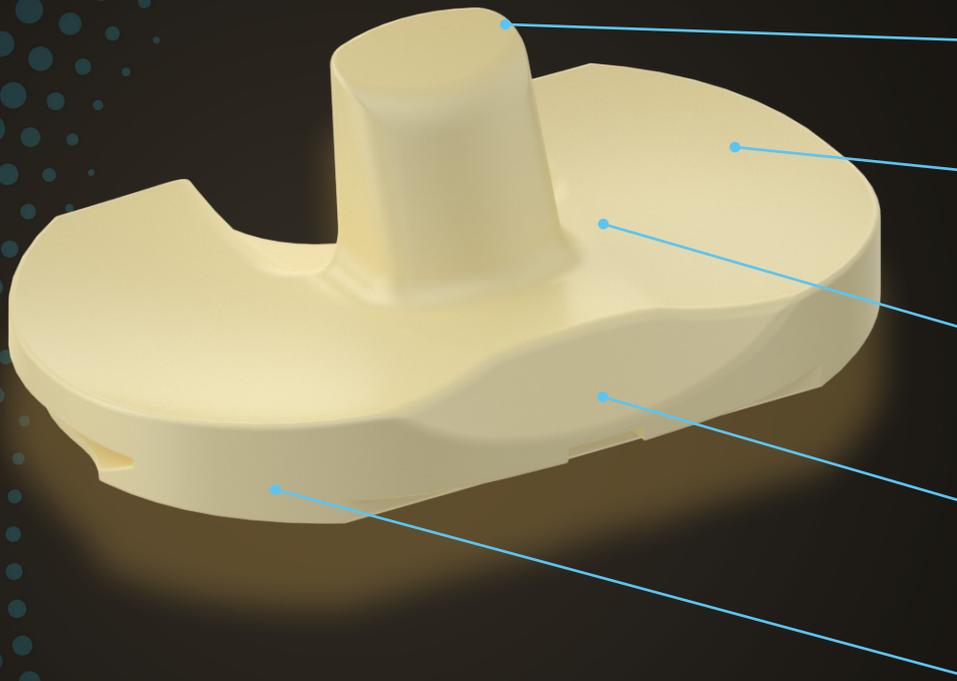

PS/PS+ Jump  
height = 17 mm

Libertà di rotazione  
del vincolo PS

Inserto PS+  
vincolato di 3°  
IE e VV

Recesso anteriore  
accogliente per il  
tendine rotuleo


Polietilene infuso di  
vitamina E E-Dur<sup>1</sup>

La camma posteriore  
inclinata di 5° aumenta  
la stabilità

Smusso posteriore  
progettato per ridurre  
l'impingement

Slope posteriore di 0°

Sistema di bloccaggio  
a coda di rondine  
posteriore e centrale

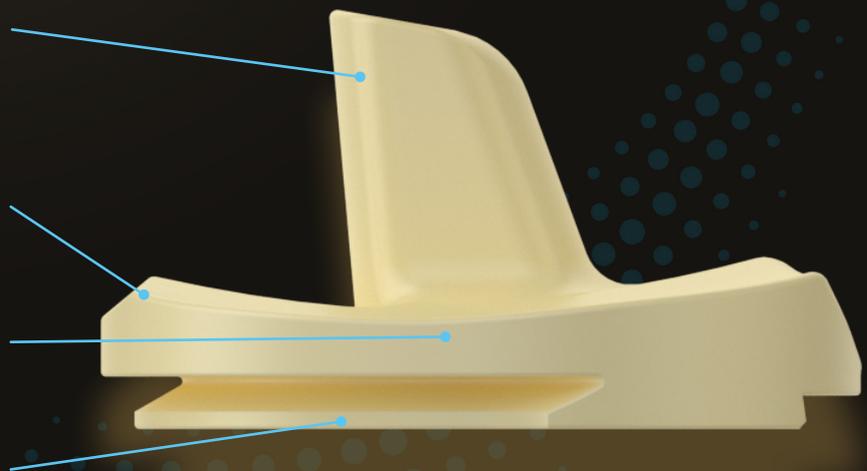

<sup>1</sup>Reticolazione con una dose di radiazioni gamma di 75 kGy in aria quindi sterilizzata con EtO.